

こんなこと
困って
いませんか？

- ✓ ご利用者が転落しないように、座位を安定させてあげたい…
- ✓ 浴室では身体がすべりやすく、ご利用者の身体の近くで
介助してあげたい…



座位安定シャワーキャリーなら 座位が安定しやすいので、ヒヤリハットの軽減につながります。

プロフィットケア

こだわりの 座面形状

●印が座骨を支えるため、おしりが落ちにくく、座位が安定しやすい。



洗 部が大きく開いているため、手を入れやすく洗やすい。

座 前方ハンドル

ハンドルをしっかり握ることで、安心して座ることができます。水抜きがしやすくなりました。

座 ビタッと背もたれ

2分割形状で、背骨が圧迫されにくい。


座 座面・背面の後傾角度



座 おしりがピッタリする角度



後車輪を太くすることで安定感が増しました

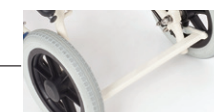

駐車ブレーキペダル
幅広で、裸足でも操作しやすい。

ノーパンクタイヤ

移 スイングアウト式
フットレッグサポート

取り外ししやすくなりました。

移 上下スライド式アームサポート

横移乗に便利。自立支援に。固定ノブがワンタッチになりました。

座位安定シャワーキャリー SY-20

129,800円(本体価格 118,000円)

レンタル対象品 TAIS 00495-000070

【材質】 フレーム/アルミ(塗装)
パッド(シート・バックサポート・ハンドル)/発泡ウレタン
【最大使用者体重】 80kg(積載物を含む)

(単位:mm)

前輪 × 後輪	前座高	後座高	座 幅
4インチ × 12インチ	450	390	400
座奥行	バックサポートバット高	アームサポート高	手押しハンドル高
400	375	255	882
全 幅	全 高	全 長	重量(kg)
509	882	880	15.0

ビジョン タヒラ株式会社

〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町4番4号 ビジョンビル

●札幌営業所 (011)806-1161 ●仙台営業所 (022)208-8811 ●東京営業所 (03)3661-4312
●名古屋営業所 (052)231-9811 ●大阪営業所 (06)6354-5771 ●広島営業所 (082)543-5181
●福岡営業所 (092)716-3621

プロフィットケア



プロフィットケア

座位保持自走型 ラクリオ® 03

座位保持ティルトリクライニング ラクレスト® 05

フルリクライニングキャリー 07

自動ブレーキ付き車いす ロックアシスタ®II 13

ニュースウイングプラス® 17

ウイングアップ® 19

T-1N 20

個別昇降テーブル ここあ® 21

座位安定シャワーキャリー 23

プロフィットケア®

正しく座って変わる毎日

寝たきりになると、食事がスムーズにできなくなったり、
視線は天井に行きがちで刺激の少ない生活になってしまいます。

でも、座ることができれば、自分の力で食事ができたり、
周りを見渡すことができたりと、毎日の生活が大きく変わります。

プロフィットケアは、様々な身体状況に合わせてプロレベルのフィットに簡単に調整できるので、

今までなかなかうまく座れなかった人でもいつも正しい姿勢を保持して座れます。

もちろん、いつでも再調整も簡単にできるので身体状況の変化に応じて長く使えます。



プロフィットケア® 3つのこだわり

自立をサポートする
姿勢保持の工夫が
盛り込まれている

様々な症状の
身体の変化に応じて
調整ができ
長く使える

操作がわかりやすく
かんたんで、
誰でも使いこなせる

ご利用者の状態	1	2	3	4	5	6	7
	車いすが必要になってきた。	腕力がなくなり足こぎも必要になってきた。	ベッドや食卓いすへの移乗が困難になってきた。	自走ができなくなってきた。	標準的な背もたれでは座位が保てなくなってきた。	座位姿勢が苦しくなってきた。	寝たきりの状態が長く続くようになってきた。
今までの車いすラインアップ	自走型			介助型			
	標準型	スイングアウト	肘掛跳上げスイングアウト(自走)	肘掛跳上げスイングアウト(介助)	ティルト	ティルトリクライニング	フルリクライニング
これからの車いすラインアップ	座位保持自走型 ラクリオ®				座位保持 ティルトリクライニング ラクレスト®		フル リクライニング FC シリーズ



座位保持自走型
ラクリオ®

▶P03

座位保持能力の変化に合わせて長期間使用できる、自走型車いす。



座位保持ティルトリクライニング
ラクレスト®

▶P05

様々な姿勢に合わせて変形し、座位を保持するティルトリクライニング車いす。



フルリクライニングキャリー

▶P07


背中・おしりがズレない特殊機構で、ご自分で動けない方でも快適に過ごすことができるフルリクライニング車いす。

こんなこと
困って
いませんか？

✔ **ずっと車いすに座り続けていると、
だんだん姿勢がくずれてきてしまいます…**




姿勢がくずれてしまう方に、介助式のティルトリクライニング等をご利用いただくと、
一時的な姿勢くずれは対応できますが、残存能力の低下を招くおそれがあります。

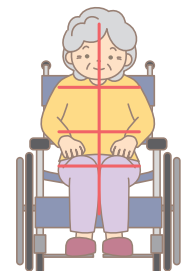

姿勢良く座っている。



だんだん姿勢が
くずれてきた…。

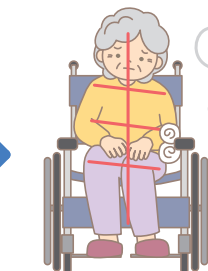

タオルとかで何とか姿勢を
保持する。



ティルトやティルトリクライニングに
乗り換えてしまう。

詰めるの
大変！

でも、まだ
自走できる能力は
あるのに…。

座位保持自走型 ラクリオ®なら

ご利用者の座位保持能力の変化に、かんたんに合わせられるので、長期間使用を可能にします。
骨盤を安定させ、様々な姿勢くずれに対応します。

施設内車いすの
有効活用にもつながります



動画で詳しく
解説しています



PR-1000

座位保持自走型 ラクリオ®

座位保持自走型 ラクリオ® PR-1000

115,000円（非課税） レンタル対象品 TAIS 00495-000059

ラクリオ® 介助ブレーキ付 PR-1000B

134,000円（非課税） レンタル対象品 TAIS 00495-000064

〔材 質〕フレーム／アルミ シート・クッション（表地）／ポリエステル
クッション（中材）／ウレタンフォーム

オプション

エレベーター PTH-EL-1

単体購入
36,080円（本体価格 32,800円）

車いす同時購入
32,800円（非課税）

レンタル対象品 TAIS 00495-000071

オプション

ラクリオ用 調整ヘッドサポート

単体購入
25,300円（本体価格 23,000円）

車いす同時購入
23,000円（非課税）

レンタル対象品 TAIS 00495-000082


姿勢くずれがすすんだ方には、シート全体でかんたんに、からだを安定させることもできます。

プロフィットケア® 座位保持自走型 ラクリオ® 特長

介助を **らくらく** **かんたん** にする機能が満載！

ホールド機能

様々な人の骨盤を安定させ、姿勢くずれを防ぐホールド機能（張り調整式）。

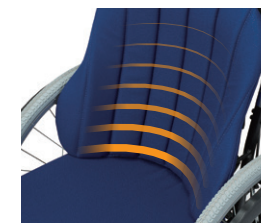

スライドバックサポート

様々な人の体格に合わせて高さ調整可能。



オプション 調整ヘッドサポート（フレックスヘッド）

高さ調整・前方への調整幅が広くなり、様々な方への幅広に対応可能。



4°～18° かんたんレバー操作

より重度になっても骨盤から背中にかけての支持面を増加。シート全体でからだを受けとめる座面角度調整機能。

アームサポート跳ね上げ

転倒防止バー

スイングアウト機能

折りたたみ可能



握りやすくこぎやすい幅広ハンドリム

一般的な車いす



ラクリオ



（※座角4度時）


前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高	アームサポート高	座面クッション厚
6 インチ	22 インチ	435mm	410mm	400mm	400mm	460mm	235mm	50mm
座面ティルト角度	全幅	全高	全長	折りたたみ寸法		重量		耐荷重
4°～18°	600mm (PR-1000B 620mm)	980mm	1,080mm	390×690×1,020mm (PR-1000B 410×690×1,020mm)		19.8kg (PR-1000B 21.0kg)		100kg

こんなこと
困って
いませんか？

✓ 体格はもちろんのこと、拘縮や円背など身体状況が様々で
ぴったり合う車いすが、なかなかありません…



ご利用者の状態に合わせてクッションや座布団をあてる位置を調整したり、タオルを丸めてからだの隙間にはさんだり、こまめに座り直しをしたりと、介助する方々の知識・技術・工夫がとても重要です。

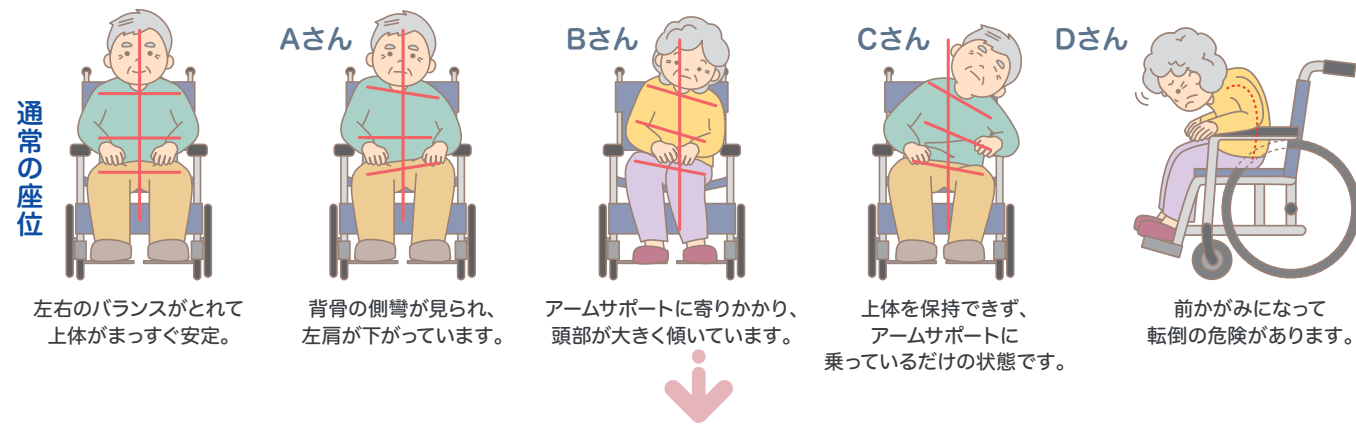

座位保持ティルトリクライニング ラクレストなら

座位保持が困難な方の姿勢を、車いすが変形して長時間サポート。
大柄な方、小柄な方、左右に傾いてしまう方、円背の方など、様々な身体状況に合わせることができます。

動画で詳しく
解説しています



座位保持ティルト リクライニング ラクレスト®

座位保持ティルトリクライニング
ラクレスト® PR-2100

218,000円（非課税） レンタル対象品 TAIS 00495-000080

ラクレスト® 介助ブレーキ付 PR-2100B

237,000円（非課税） レンタル対象品 TAIS 00495-000081

【材 質】 フレーム／アルミ クッション（表地）／合成皮革
クッション（中材）／ウレタンフォーム

オプション

エレベータリング PTH-EL-1

単体購入
36,080円（本体価格 32,800円）

車いす同時購入
32,800円（非課税）

レンタル対象品 TAIS 00495-000071

オプション

ラクレスト用 まる洗いクッションシート

単体購入
13,200円（本体価格 12,000円）

車いす同時購入
12,000円（非課税）

レンタル対象品 TAIS 00495-000077



ご利用者に優しい乗り心地で、どなたでも操作がかんたんです。

プロフィットケア® 座位保持ティルトリクライニング ラクレスト® 特長

介助が **らくらく** 座位保持
工具不要で **かんたん** 操作！


ヘッドサポート・座奥行調整

大柄な方から小柄な方まで幅広く対応。



座奥行調整

スライドアームサポート （自動ロック）

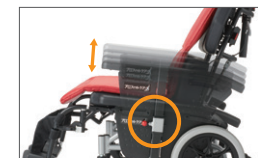

ラチェット式サイドサポート

左右へのからだの
傾きを改善します。



フレックスヘッド

高さ調整、前方への調整幅
が広くなり、様々な方へ幅
広く対応。



背中・中折れ機能

円背や食事の際の姿勢をサポート。



かんたん
レバー操作

転倒防止バー



足踏み駐車ブレーキ

リクライニングしても横から
かけられる

ノーパンクタイヤ

シート3層構造

ご利用者に優しい乗り心地の
ための工夫。

ワイヤー
スプリング



ベース
クッション



やわらか
クッションシート


スイングアウト機能

前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高	アームサポート高	座面クッション厚
6 インチ	14 インチ	470mm	410mm	400mm	360～440mm	500mm	175/200/ 225/250mm	50mm
座面ティルト角度	リクライニング角度	全幅	全高	全長	折りたたみ	重量	耐荷重	
7°～17°	95°～130°	574mm	1,160～1,550mm	1,100mm	574×850×795mm	28.0kg(PR-2100B 30.5kg)	75kg	

おしりも背中もズれない快適な乗り心地と、介助者の負担軽減を追求




ずっと座っている姿勢なのでどんどんすべってきます…

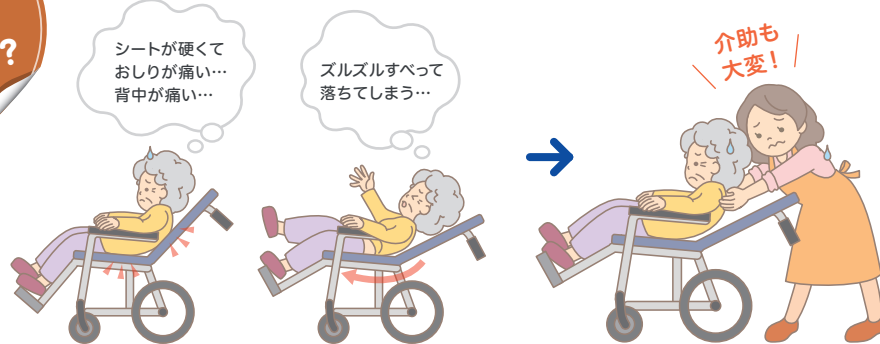

ご自身で座り直しが難しいご利用者は、長時間同じ姿勢のため、褥瘡(床ずれ)のリスクも高く、身体に負担がかかります。ずり落ち防止の工夫がない車いすでは、ズルズルとすべり台のようにすべり落ちてしまいます。座り直し介助の負担も大きいです。

狭いスペースでも
とりまわしが楽だといいですよね…

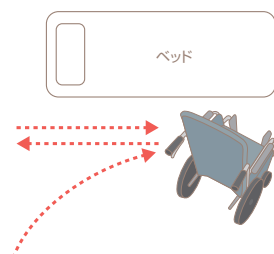

狭い部屋で斜めに
車いすを入れてしまうと、
切り返しが大変…

ラクな姿勢で
移乗したいですよね…



高さの合わせられないものに対しての
移乗は大変ですよね…



そのお悩み、フルリクライニングキャリー FC シリーズが解決します！

FC-120



まる洗いシートタイプ

- 一般消毒(200ppm)、
おう吐物の消毒(1000ppm)の
次亜塩素酸にも対応
- 血液防汚機能 ●抗菌機能
(FC-220、FC-320共通)

- 通気性がよいのでムシが軽減され快適
- 洗濯機でまる洗いでできていつも清潔

※洗濯は、取扱説明書の洗濯方法に従ってください。

リクライニングの動きの工夫で
背中もおしりもズれない快適な乗り心地と
介助者の負担軽減を追求。

フルリクライニングキャリー
FC-120

260,000円(非課税)

レンタル対象品 TAIS 00495-000050

まる洗いシートタイプ

290,000円(非課税)

レンタル対象品 TAIS 00495-000051

[材 質] フレーム(表面処理)/スチール(粉体塗装)
シート(表地)/合成皮革
まる洗いシートタイプ:ポリエステル
シート(中材)/ウレタンフォーム
まる洗いシートタイプ:ウレタンフォーム洗えるタイプ



動画で詳しく
解説しています

FC-220



横付け機能付きで、アプローチがとても楽に。
狭いスペースでも取りまわしがしやすいです。

横付けフルリクライニングキャリー
FC-220

320,000円(非課税)

レンタル対象品 TAIS 00220-000169

[材 質] 本体フレーム/スチール(粉体塗装)
シート(表地)/合成皮革
シート(中材)/ウレタンフォーム



動画で詳しく
解説しています

FC-320



電動で昇降するので、
持ち上げない介護が可能になります。
「介護テクノロジーの試用貸出リスト(移乗支援)」
掲載品

電動昇降フルリクライニングキャリー
FC-320

520,000円(非課税)

レンタル対象品 TAIS 00220-000168

[材 質] 本体フレーム/スチール(粉体塗装)
シート(表地)/合成皮革
シート(中材)/ウレタンフォーム
[電装品] 電源:AC100V 50/60Hz、バッテリー:DC24V
充電時間:約6時間、
連続使用時間:2分、電源コード:約3m



動画で詳しく
解説しています

プロフィットケア フルリクライニングキャリーシリーズ 共通特長

特長 ① 居住性を高める3つの機能

1 クッション性



背面と座面はワイヤースプリングで支える乗り心地の良さ

2 背中がズレ防止



背中がズレない多支点リンクの関節構造リクライニング

3 おしりのズレ防止



おしりがズレない膝ティルト

特長 ② 1つのレバーで 4つの動き



背中がズレない多支点リンク



おしりがズレない膝ティルト

リクライニングレバー



複雑な操作は車いすにおまかせ



リクライニング



転倒防止バー

※FC-120のみ

優れた重心バランスのFC-120の安全性をより高めます。

特長 ③ 誰にもやさしい かんたん 6つの操作



アームサポートは上げれば自動ロック



ヘッド部は前後に押すだけ
※視線改善や食事がしやすい姿勢になります



フットサポートの高さ調整は工具いらず



リクライニングしても持ちやすい水平ハンドル



リクライニングしても横からかけられる足踏み駐車ブレーキ





単独エレベータリング可能

プロフィットケア フルリクライニングキャリー FC-220/-320 共通特長

特長 横付け機能で らくらく かんたん 車いす取りまわし

ベッドに斜めに近づけてもそのまま横付けできる！

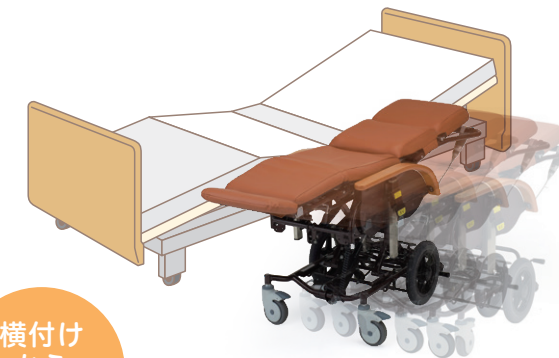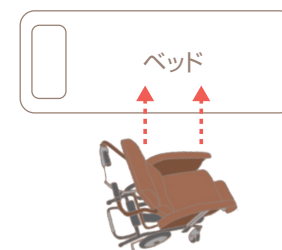

横付けする

横付けペダル

横付けキャスター



横付けペダルを踏むことにより、横付けキャスターが床に接地。
(同時に駐車ブレーキがかかります。)ベッドへの横付けがラクにできます。



横付けキャスターが接地

横付けから戻す

やさしさプレート



戻す時は、やさしさプレートを踏み横付けペダルが足裏に当たることで、静かに後車輪を床に接地することができます。駐車ブレーキはかかったままのため安心です。



後車輪が接地

プロフィットケア フルリクライニングキャリー FC-320 特長

特長 ① 電動昇降で らくらく かるがる 移乗介助

座面高が535mm～750mm(前座高)で無段階調整が可能。
ベストな高さで移乗介助ができます。



ストロークが215mmあります。



手元スイッチ



フルリクライニングキャリー FC-320 特長

特長 ② 高さメモリ機能で **らくらく** **かんたん** に高さ合わせ

事前に高さを登録し、「高さ合わせボタン」を押すと、登録した高さに昇降し自動で停止します。高さ合わせを考えなくても良いので、昇降中もご利用者をしっかり見守ることができます。



その他の機能も充実！



転倒防止車輪



背面(左/コントロールボックス、右/バッテリー)バッテリーの充電コードは背面に収納可能



ストッパー付き前輪キャスター

フルリクライニングキャリー

オプション

※価格はお問い合わせください。
※外観は予告なく変更することがあります。
※写真は座奥行短縮シート以外は旧シートです。
※FC-320は、酸素ボンベ架取付不可となります。

FC-120、FC-220、FC-320 共通




専用ヘッドサポート



専用肘当てカバー



点滴棒

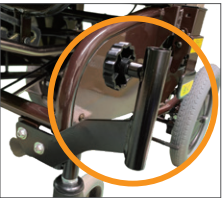

点滴棒ホルダー



専用シートベルト(腰用・脚用)



座奥行短縮シート

※FC-120に装着



フルリク用まる洗いクッションシート

FC-120 専用



酸素ボンベ架

FC-220 専用



酸素ボンベ架兼点滴棒ホルダー

FC-120

前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高	アームサポート高
6 インチ	12 インチ	521mm	491mm	430mm	440mm	704mm	237mm
座面クッション厚	リクライニング角度	全幅	全高	全長	折りたたみ寸法	重量	耐荷重
50~60mm	98°~166°	604mm	1,195mm	1,067mm	604×680×907mm	31.0kg	75kg

FC-220

前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高	アームサポート高
6 インチ	12 インチ	521mm	491mm	430mm	440mm	704mm	237mm
座面クッション厚	リクライニング角度	全幅	全高	全長	折りたたみ寸法	重量	耐荷重
50~60mm	98°~166°	604mm	1,195mm	1,100mm	604×680×955mm	37.0kg	100kg

FC-320

前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高	アームサポート高
直径 125mm	12 インチ	535~750mm	505~720mm	430mm	440mm	705mm	237mm
座面クッション厚	リクライニング角度	全幅	全高	全長	折りたたみ寸法	重量	耐荷重
50~60mm	98°~166°	604mm	1,210~1,425mm	1,160mm	604×705×1,010mm	54.5kg	100kg

自動ブレーキ付き車いす

ロックアシスタⅡ[®]

シリーズ

前にも後ろにもピタッと止まる

自動ブレーキ付きの車いす



こんなこと
起きて
いませんか？車いすを
こいでいて…ブレーキをかけ忘れて
立ってしまい
はずみで車いすが
後ろに下がってしまって座ろうとしたら
車いすがなく
転倒してしまった

ロックアシスタ®Ⅱなら

シートから立ち上がると自動的にタイヤロックが働き、車いすが止まるので、安心です。

ピタッ
と止まる動画で詳しく
解説しています

ロックアシスタ®Ⅱ

コンパクト設計
家の中での操作もラクラク

ロックアシスタ®Ⅱ

LA-RX

145,000円（非課税）

レンタル対象品 TAIS 00495-000072

【材 質】 フレーム/アルミ シート地/ポリエステル(座シート・バックサポート・レッグサポート)


オプション

LA クッション(背・座)

単体購入 16,500円(本体価格 15,000円)

車いす同時購入 15,000円(非課税)

レンタル対象品 TAIS 00495-000073

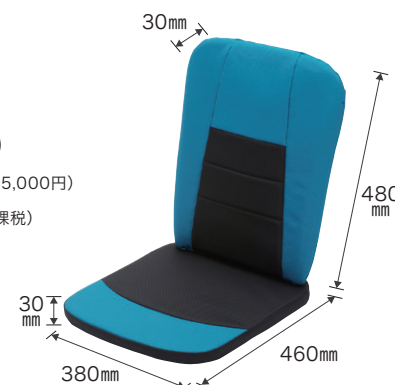

LA-1

ロックアシスタ®Ⅱ

標準タイプ LA-1

105,000円（非課税）

レンタル対象品 TAIS 00495-000061



LA-2

ロックアシスタ®Ⅱ

低床タイプ LA-2

105,000円（非課税）

レンタル対象品 TAIS 00495-000062



LA-3

ロックアシスタ®Ⅱ

ウィングアップ
スイングアウトタイプ LA-3


125,000円（非課税）

レンタル対象品 TAIS 00495-000063


プロフィットケア® ロックアシスタ®Ⅱ 共通特長

特長 ① 前にも後ろにもピタッと止まるカム式ロック！

● 乗った状態

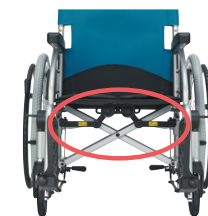

● 乗っていない状態

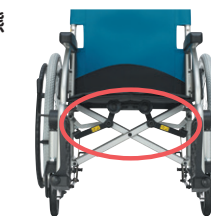

特長 ② 乗っていなくても移動がかんたん！

足踏みレバーを踏むと、
簡単にタイヤロック解除が
できます。折りたたむと、
自動でタイヤロック解除に
なります。

※タイヤロックは、ブレーキかけ忘れのための補助ブレーキです。車いすをご使用になる際は、必ず駐車ブレーキをおかけください。

特長 ③ ワイヤーレスなのでメンテナンスがらく！

ワイヤーレスで座面下がすっきり。
メンテナンス作業がらくになります。

LA-RX

前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高	アームサポート高
5 インチ	20 インチ	400mm	375mm	400mm	400mm	450mm	245mm
全幅	全高	全長	折りたたみ寸法		重量	耐荷重	
580mm	880mm	970mm	400×650×730mm		18.0kg	35～100kg	

LA-1

前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高	アームサポート高
6 インチ	22 インチ	435mm	410mm	400mm	400mm	400mm	225mm
全幅	全高	全長	折りたたみ寸法		重量	耐荷重	
640mm	860mm	998mm	410×680×998mm		16.6kg	35～100kg	

LA-2

前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高	アームサポート高
6 インチ	20 インチ	375mm	350mm	400mm	400mm	400mm	225mm
全幅	全高	全長	折りたたみ寸法		重量	耐荷重	
640mm	860mm	998mm	410×620×998mm		16.3kg	35～100kg	

LA-3

前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高	アームサポート高
6 インチ	20 インチ	400mm	375mm	400mm	400mm	400mm	225mm
全幅	全高	全長	折りたたみ寸法		重量	耐荷重	
610mm	885mm	1,030mm	420×650×730mm		17.3kg	35～100kg	

専門職からのコメント



シーティングエンジニア 栗原 俊介氏

株式会社アップライド所属
新宿区食支援研究会 研究員

- 福祉用具プランナー
- 福祉用具専門相談員
- 福祉住環境コーディネーター 2級
- シーティングエンジニア (JAWS/日本車椅子協会)
- リフトインストラクター上級 (JASPA)
- ノーリフトケアコーディネーター
- 可搬型階段昇降機安全指導員




自動ブレーキ機能に背張り調整機能が付いているかなりレアな製品ですが、需要は高いと思います。在宅介護の現場で起こる事故は、転倒が最も多いと言われますが、自動ロック機構は、座面に重さが無い時でも前後両方にロックが掛かり、転倒事故を回避できる機構です。また、ロック解除レバーは介護業務のシチュエーションによって操作でき、操作の選択肢が増えるので、他にはない差別化された機能だと思います。

また今回搭載された背張り機構は、他社にはないものになっています。背張り機構のベルトが長いので、様々な変形の方に対応できそうです。骨盤上部横にある上後腸骨棘と胸郭などをしっかり支えてくれます。
理学療法士の大淵哲也先生も仰っていましたが、円背・骨盤後傾の多い日本人の高齢者でも、肩甲骨上部から這わせているベルトを上から下方向にクロスして胸郭を支えることが実現出来ます。

ひじ掛けは、比較的低い位置に設計されていて、これなら座っているときも肩の緊張を緩めて姿勢崩れや拘縮の予防にも繋がると思います。
教科書に書いてある背張り方法とは異なった調整となるため、簡易調整マニュアルのようなものが必要になりますが、できるだけ多くの方にも対応できるようにした背張り機構は、ピジョンタヒラしい製品だと思います。



180近い高身長の栗原さんにもフィット

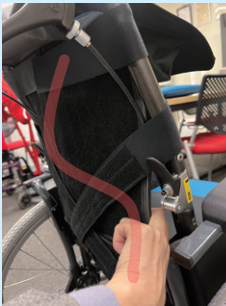

座奥にしっかりと座れます



最下部の小さなベルトは座骨を安定させ腰痛持ちの方には気持ちの良い座りが実現

スタンダード車いすシリーズ

- ティルト型車いす
- アームサポート跳ね上げ、スイングアウト車いす
- 標準型車いす



こんなこと
起きて
いませんか？

✓ 姿勢がくずれ、ずっこけ座りや前かがみになってしまう…



標準型車いすを使用していて、座位が保てなくなったご利用者は、前滑り（ずっこけ座り）姿勢になったり、前傾姿勢で頭から転落しそうになったり、常に危険な状態にさらされています。

● 前滑り（ずっこけ座り）姿勢

● 前傾姿勢

ずっこけ姿勢だと
食事が食べづらい…
座面からすべて
落ちてしまう危険も…



前かがみや側方に
倒れた姿勢だと
呼吸が浅くなったり、
頭から転落してしまう
危険も…



ニュースウイング プラス®なら

いすを傾けるだけで、**かんたん** に座位がとれます。



動画で詳しく
解説しています

ニュースウイング プラス®



NSW-2

ニュースウイング プラス® NSW-2

165,000円（非課税）

レンタル対象品 TAIS 00220-000161

【材 質】 フレーム／アルミ シート地／ポリエステル・ナイロン・PVC



NSW-2-D

ニュースウイング プラス® NSW-2-D

180,000円（非課税）

レンタル対象品 TAIS 00220-000162

【材 質】 フレーム／アルミ シート地／ポリエステル・ナイロン・PVC

プロフィットケア ニュースウイング プラス® NSW-2 特長

介助を **らくらく** **かんたん** にする機能が満載！

ティルト機構

0°～30°まで好みの
角度に調整できます。



ヘッドサポート



上下・前後・左右360°回転し、
頭部を安定させます。


介助ブレーキレバー



※NSW-2-Dのみ
ティルトレバー
色付きで誤操作防止に。

シート

汚れが
拭き取りやすく、
通気性も確保した
仕様。

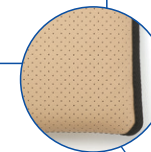

アームサポート



張り調整式
バックサポート



背中の曲線に合わせて
調整できます。

足踏み駐車ブレーキ



スイングアウト式
フット・レッグサポート

※取り外し可能
移乗介助時に便利。

ノーパンクタイヤ（ハイポリマー）

パンクや空気漏れの心配がなく安心。

NSW-2

前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高	アームサポート高	座面クッション厚
6 インチ	16 インチ	460mm	460mm	400mm	400mm	440mm	240/265/290/315mm	—
座面ティルト角度	全幅	全高	全長	折りたたみ寸法		重量		耐荷重
0°～30°	580mm	1,020～1,300mm	1,040mm	335×730×1,020mm		20.0kg		100kg

NSW-2-D

前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高	アームサポート高	座面クッション厚
6 インチ	16 インチ	460mm	460mm	400mm	400mm	440mm	240/265/290/315mm	—
座面ティルト角度	全幅	全高	全長	折りたたみ寸法		重量		耐荷重
0°～30°	600mm	1,020～1,300mm	1,040mm	355×730×1,020mm		20.7kg		100kg

座面の高さ調節※（3段階）、アームサポート跳ね上げ、スイングアウトができます



- 座幅は3タイプ(380mm・400mm・420mm)から選ぶことができます。

ウィングアップ® WD1N / WCD1N

各105,000円（非課税）

WD1N-38(座幅380mm) WCD1N-38(座幅380mm)
WD1N-40(座幅400mm) WCD1N-40(座幅400mm)
WD1N-42(座幅420mm) WCD1N-42(座幅420mm)

【材 質】フレーム／アルミ シート地／ナイロン

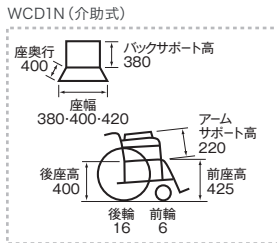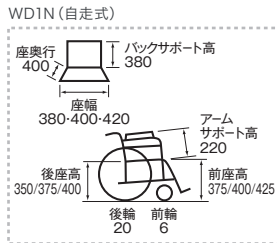WD1N(自走式)
レンタル対象品 TAIS 00220-000153WCD1N(介助式)
レンタル対象品 TAIS 00220-000154

WD1N

WD1N-38・40・42

前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高
6インチ	20インチ	375/400/425	350/375/400	380・400・420	400	380
アームサポート高	全幅	全高	全長	折りたたみ寸法(全幅×全高×全長)	重量	耐荷重
220	590-610-630	860/885/910	1,030	360×(610/635/660)×990	15.1kg	100kg

WCD1N-38・40・42

前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高
6インチ	16インチ	425	400	380・400・420	400	380
アームサポート高	全幅	全高	全長	折りたたみ寸法(全幅×全高×全長)	重量	耐荷重
220	540-560-580	910	1,030	280×660×960	13.6kg	100kg

※介助式(WCD1N)は、座面の高さ調節ができません。

介助式あります
(WCD1N)

WD1N・WCD1N の機能に、アームサポート高さ調節、ノーパンクタイヤを追加



- 座幅は3タイプ(380mm・400mm・420mm)から選ぶことができます。

ウィングアップ® WD2 / WCD2

各125,000円（非課税）

WD2-38(座幅380mm) WCD2-38(座幅380mm)
WD2-40(座幅400mm) WCD2-40(座幅400mm)
WD2-42(座幅420mm) WCD2-42(座幅420mm)

【材 質】フレーム／アルミ シート地／ナイロン

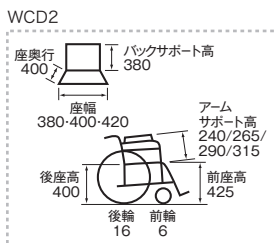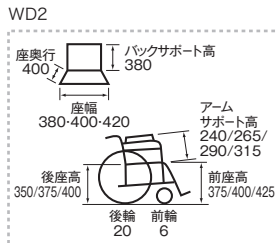WD2(自走式)
レンタル対象品 TAIS 00220-000152WCD2(介助式)
レンタル対象品 TAIS 00220-000151

WD2

WD2-38・40・42

前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高
6インチ	20インチ	375/400/425	350/375/400	380・400・420	400	380
アームサポート高	全幅	全高	全長	折りたたみ寸法(全幅×全高×全長)	重量	耐荷重
240/265/290/315	590-610-630	860/885/910	1,030	360×(610/635/660)×990	16.9kg	100kg

WCD2-38・40・42

前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高
6インチ	16インチ	425	400	380・400・420	400	380
アームサポート高	全幅	全高	全長	折りたたみ寸法(全幅×全高×全長)	重量	耐荷重
240/265/290/315	540-560-580	910	1,030	280×660×960	15.4kg	100kg


※介助式(WCD2)は、座面の高さ調節ができません。

介助式あります
(WCD2)

全機種ノーパンクタイヤで、空気圧管理の業務省力ができます。

T-1N

- シンプルスタンダードな車いす。

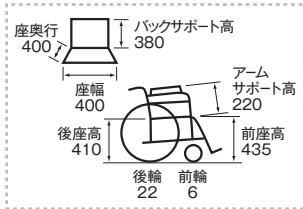

標準型 T-1N-400

65,000円（非課税）


レンタル対象品 TAIS 00220-000163

【材 質】フレーム／アルミ シート地／ナイロン

(※指定の無い時の単位mm)

前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高
6インチ	22インチ	435	410	400	400	380
アームサポート高	全幅	全高	全長	折りたたみ寸法(全幅×全高×全長)	重量	耐荷重
220	620	850	980	330×660×960	11.0kg	100kg

- 座幅420mmでゆったりと座れます。

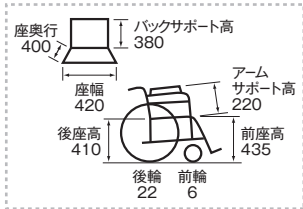

標準型 T-1N-420 幅広

65,000円（非課税）


レンタル対象品 TAIS 00220-000164

【材 質】フレーム／アルミ シート地／ナイロン

(※指定の無い時の単位mm)

前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高
6インチ	22インチ	435	410	420	400	380
アームサポート高	全幅	全高	全長	折りたたみ寸法(全幅×全高×全長)	重量	耐荷重
220	640	850	980	330×660×960	11.0kg	100kg

- 前座高375mm、足こぎをする方や小柄な方へ。
- 低床でも押し手の高さが低くないので介助がしやすい。

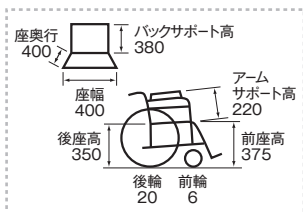

標準型 T-1N-Lo 低床

65,000円（非課税）


レンタル対象品 TAIS 00220-000165

【材 質】フレーム／アルミ シート地／ナイロン

(※指定の無い時の単位mm)

前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高
6インチ	20インチ	375	350	400	400	380
アームサポート高	全幅	全高	全長	折りたたみ寸法(全幅×全高×全長)	重量	耐荷重
220	630	860	990	340×670×945	10.9kg	100kg

- ドラム式介助ブレーキ付きの車いす。

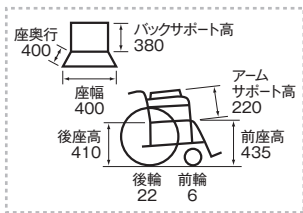

標準型 TD-1N ドラムブレーキ付

85,000円（非課税）


レンタル対象品 TAIS 00220-000166

【材 質】フレーム／アルミ シート地／ナイロン

(※指定の無い時の単位mm)

前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高
6インチ	22インチ	435	410	400	400	380
アームサポート高	全幅	全高	全長	折りたたみ寸法(全幅×全高×全長)	重量	耐荷重
220	630	850	980	340×680×960	11.9kg	100kg

- 自分で操作されない方へ、介助専用の車いす。

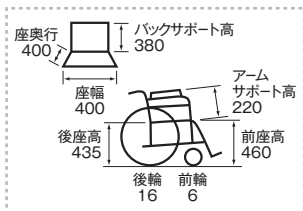

標準型 TCD-1N ドラムブレーキ付 介助式

85,000円（非課税）

レンタル対象品 TAIS 00220-000167

【材 質】フレーム／アルミ シート地／ナイロン

(※指定の無い時の単位mm)

前輪	後輪	前座高	後座高	座幅	座奥行	バックサポート高
6インチ	16インチ	460	435	400	400	380
アームサポート高	全幅	全高	全長	折りたたみ寸法(全幅×全高×全長)	重量	耐荷重
220	600	870	970	300×675×860	10.4kg	100kg

こんなこと
困って
いませんか？

- ✓ テーブルの高さが合わないことで、
上手く食事ができないご利用者がいます…



テーブルの高さが合わない事例

テーブルが高すぎて配膳された食事に手が届かないため、介助者が都度、
食器を渡すなどの一部介助を行っています。

足こぎのご利用者



ご利用者の
目線で
みると…



- 器の中身が見えていない。
- 奥の食器は、存在すら気づかないことがある。
- うどんなどの深さのある器も、中身が見えないため食べ残してしまう。

◎ 適正な高さの
テーブルに着席した
時の配膳



テーブルの高さが合わず、介助者が食器を膝の上に乗せてあげないと自分で食事ができない。

※テーブルの高さ：700mm 使用の車いす：低床前座高375mm

円背のご利用者



介助者が食器を膝の上に乗せてあげないと食事ができない。

個別昇降テーブル ここあ®なら

ご利用者一人ひとりに合わせて、簡単にテーブルの高さを調整できるので、
ご自分での食事がしやすくなります。



動画で詳しく
解説しています

個別昇降テーブル ここあ®



個別昇降テーブル ここあ® PR-T4

264,000円(本体価格 240,000円)

〔材質〕天板／メラミン化粧板 フレーム／スチール(粉体塗装)
〔重量〕83kg

個別昇降テーブル ここあ® 特長

特長 ① らくらく 個別高さ調整可能な天板



パドルレバー

どんな体格でも車いすでも、
ぴったり合う調整範囲。
誤使用防止カバー付のパドル
レバーで、かんたんに無段階
調整できる。



特長 ② らくらく 車いすアプローチ



車いすでもアプローチしやすい、
四隅にテーブルの脚がない**1本脚タイプ**。

テーブルの高さの重要性

ご自分で食事ができるご利用者にとって、テーブルの高さは大変重要なポイントです。
食べるものがご自分の目線にあって、腕の可動域内に配膳され、手が届く環境を作ることで、自立(一部介助)状態を少しでも長く維持できます。

【MEMO】

似たような身長でも、
腕がどこまで上がるか
によって手の届く範囲
が違いため、それぞれ
に机の高さを合わせる
必要があります。

例) 身長150cm	身長145cm
机の高さ 630mm	机の高さ 630mm
身長146cm	身長145cm
机の高さ 660mm	机の高さ 620mm

